

Четкий и ясный дизайн

18,5 дюймовый
поворотный монитор

Конструкция крюка предотвращает
загрязнение кабеля

Четыре активных
разъема для датчиков

Более низкое
расположения
источника питания
позволяет избежать
помех при работе



SIUI

HEADQUARTERS:

Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.
Add: No.77, Jinsha Road, Shantou 515041 Guangdong, China
Tel: 86-754-8825 0150 Fax: 86-754-8825 1499
<http://www.siui.com> E-mail: siui@siui.com

HONG KONG OFFICE:

Shantou Institute of Ultrasonic Instruments (HK) Co., Ltd.
Add: Room 2101, Tung Chiu Commercial Center 193 Lockhart Road, HK
Tel: 852-2891 6722 Fax: 852-2891 6723



SIUI



SIUI Healthcare



SIUI1978



SIUI1978

All rights reserved to SIUI 2020
Apogee 3300 RU11201204

Apogee 3300

Конкурентное качество с
конкурентоспособной ценой



SIUI



Ультразвуковые технологии и качественные изображения достигло всех видов областей исследования, независимо от уровня модели. Врачи теперь имеют возможность получить лучшее изображение по приемлемой цене. SIUI ощущает тенденции и отвечает новым обновлением Aropree 3300. С высокой производительностью изображений и полным пакетом приложений, мы считаем, что обновлённая модель удовлетворит врачей с самым высоким запросом качества изображения и доступно ий ценой в своем классе.

Ведущие технологии обработки изображений заимствованные у высококлассных моделей

Сбалансированная компенсация эха
Модель приемствует сбалансированную технологию компенсации эхо-сигнала от высокопроизводительной платформы. Он эффективно компенсирует слабые сигналы эха и сдерживает сигналы гиперэхогенные в соответствии с распределением серой шкалы и обеспечивает гораздо более равномерное изображение.

Fusion THI 2.0
На основе нового поколения гармоник инверсионной ткани Fusion THI 2.0 объединяет фундаментальную волну и гармоническую волну в дальнем поле. Благодаря значительно усиленной гармоничной волне ткани она обеспечивает улучшенное изображение, улучшающее проникновение, благодаря эффективному увеличению разрешения изображения и контраста ткани.

Нечеткий логический поток
Алгоритм нечеткой логики применяется для установки каждого ключевого параметра в определенном диапазоне. Различные виды параметров сконструированы в соответствии с целевой тканью, чтобы обеспечить самый дальний сигнал потока рекуперации, повышая чувствительность к потоку и уменьшая шум на стенке.


Xbeam 2.0
Обновленный Xbeam - это новый режим обработки, основанный на формировании на переднем конце ультразвукового луча. Благодаря управляемому углу луча и высокой частоте кадров, он эффективно увеличивает пространственное разрешение и уменьшает тень ткани. Xbeam применяется к большинству видов зондов.

Полный пакет приложений удовлетворяет ваши потребности


Aropree 3300 - это многофункциональное устройство, предназначенное для удовлетворения различных потребностей во всех видах исследования.

Женское здоровье


nSlice быстро и точно фиксирует необходимый срез

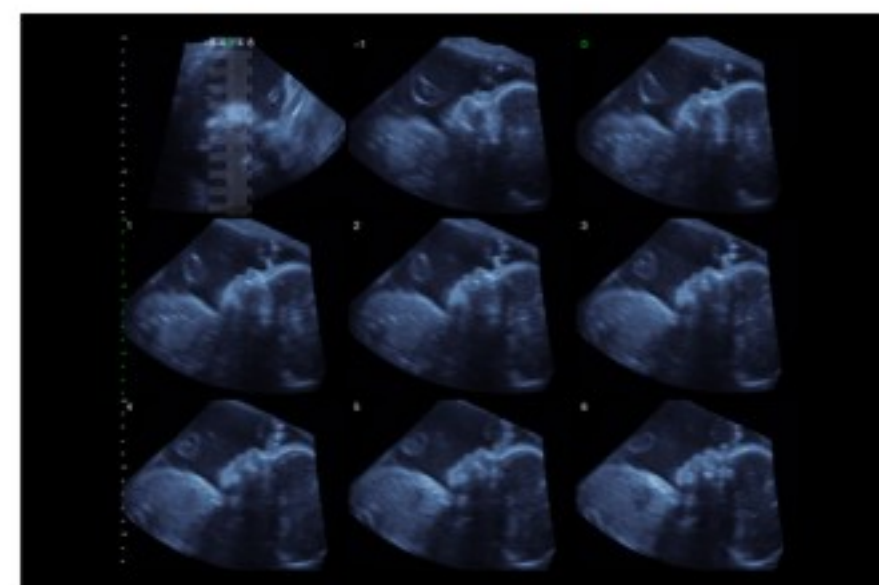

Любой среза в дальнейшем можно удобно обработать

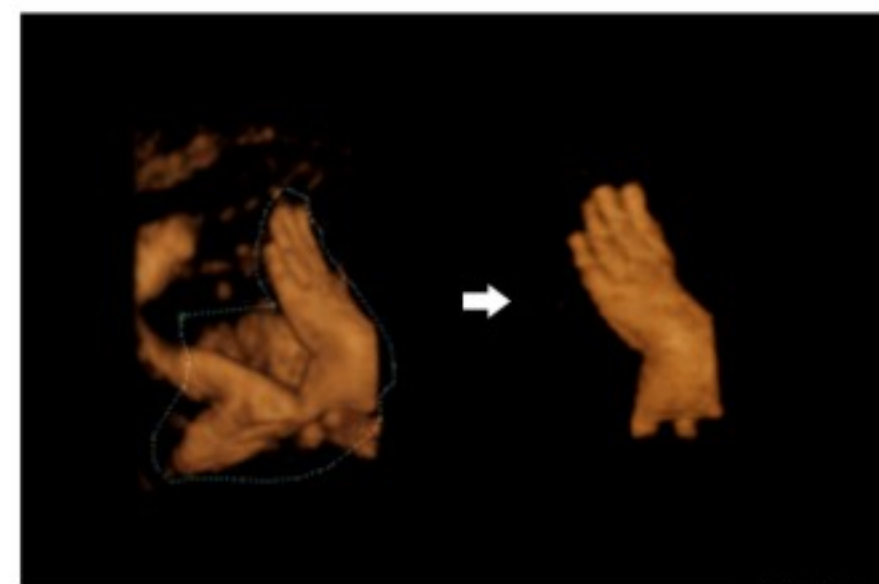

Эластография визуализирует плотность опухоли интуитивно

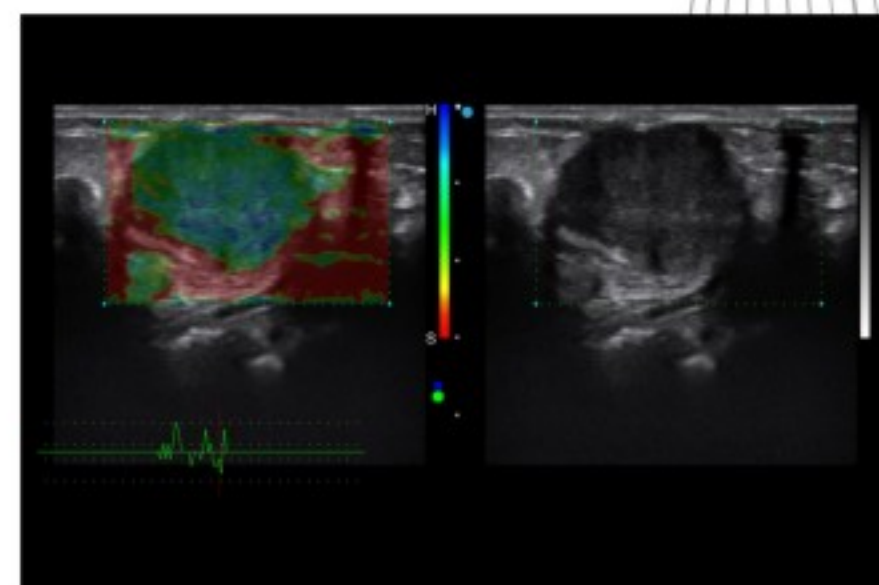


Сердечно-сосудистая и радиология


Auto IMT автоматически оценивает сосудистые заболевания



АММ гибко и точно измеряет фракцию выброса

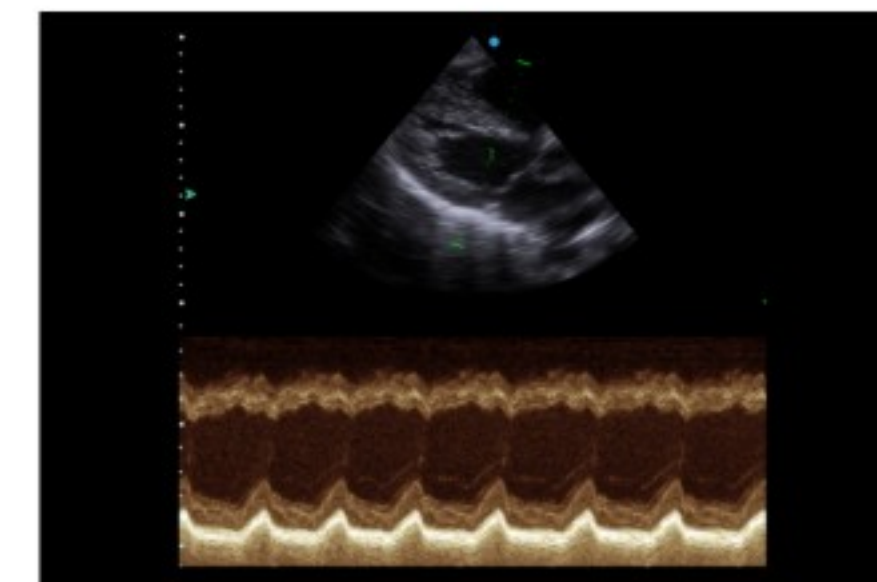


Улучшение изображения иглы при биопсии

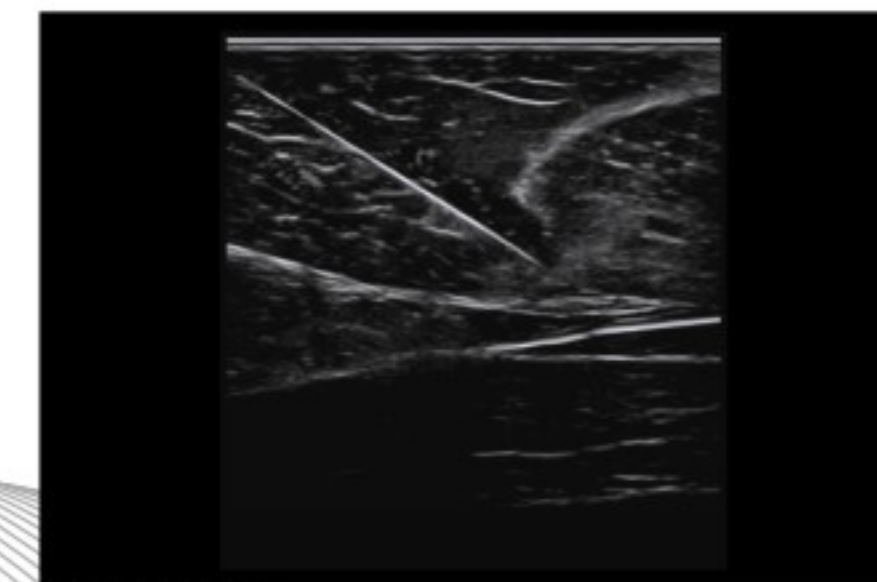

Эффективные автоматические решения

Автоматическая подгонка: автоматическая настройка обработки изображений
Автоматическая трассировка: автоматический трассировочный спектр pw для расчета
Автоматический объем: автоматический расчет объема
Quick EF: полуавтоматическая трассировка LV для расчета EF

Галерея

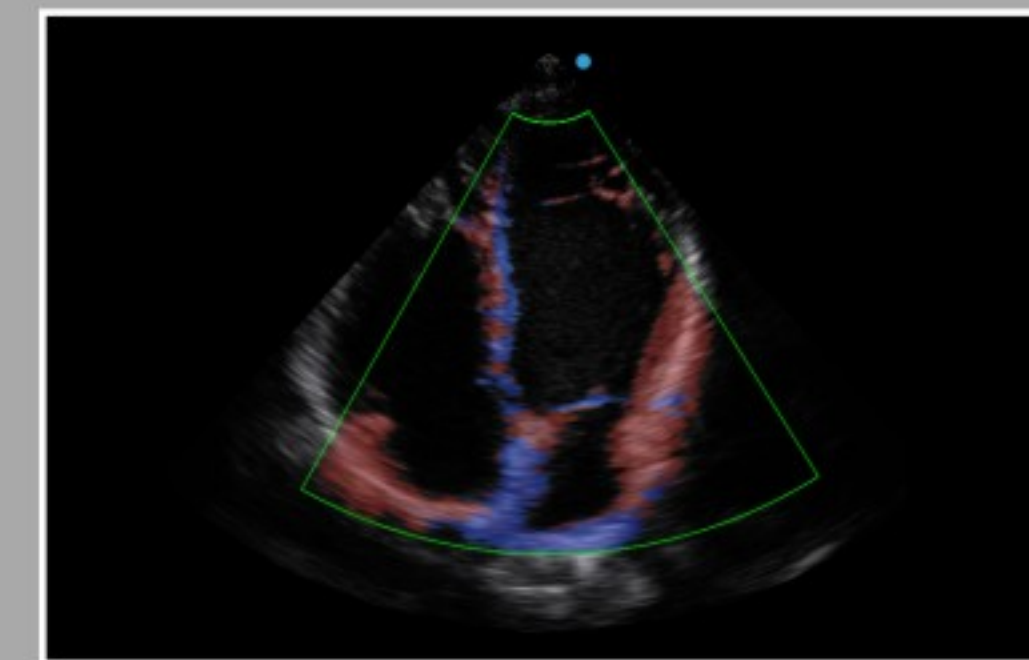

Четыре камеры с TDI




Ранние сроки в акушерстве




Лицо плода с 4D



Поликистозная почка

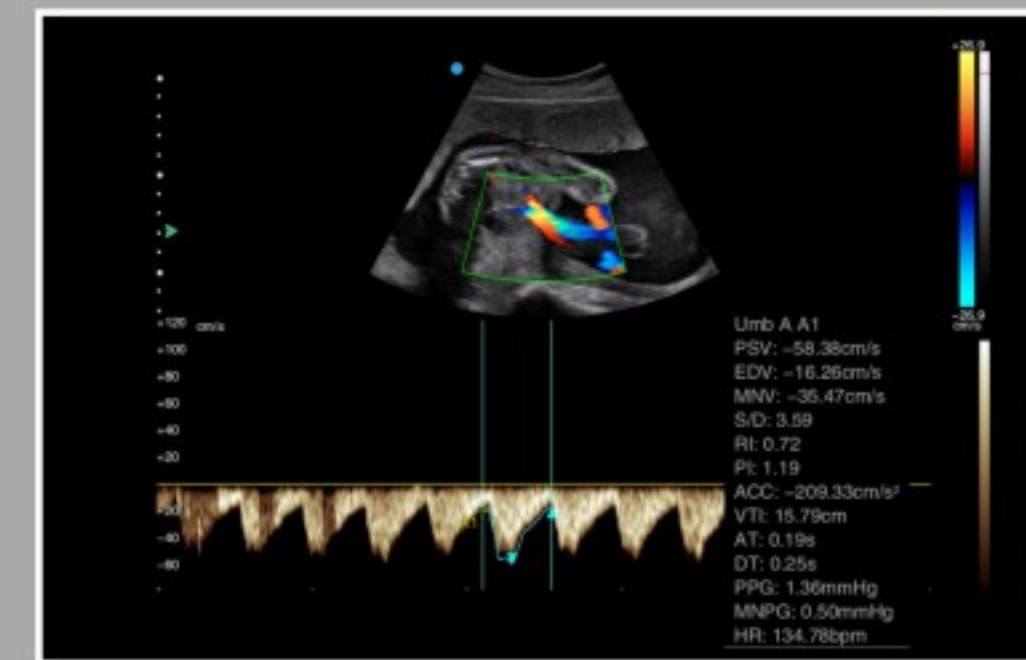

пупочная артерия плода с PW

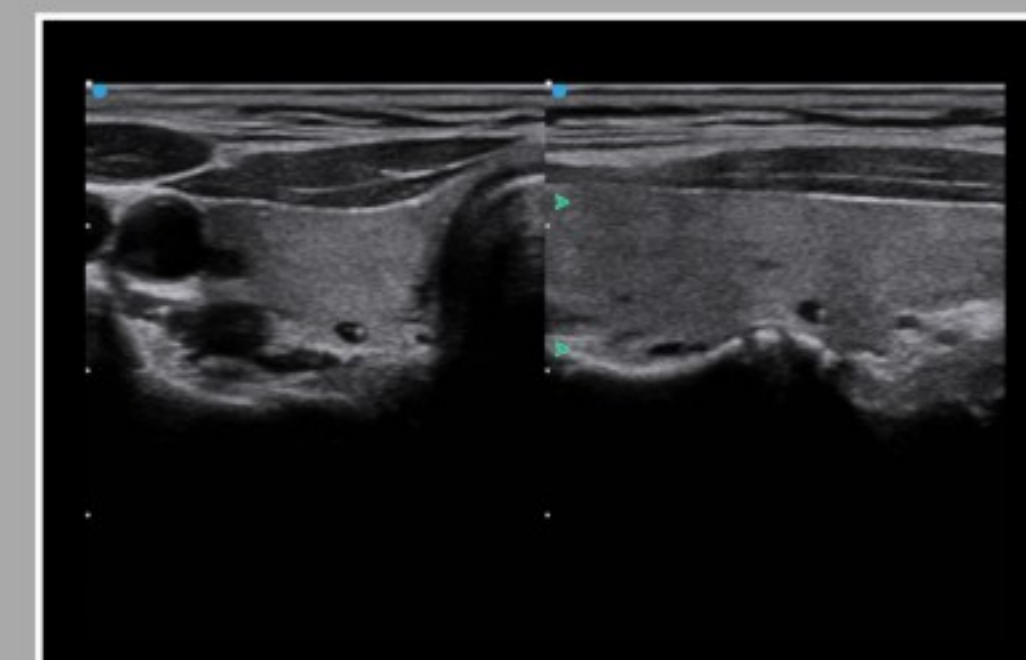

Китса в щитовидной железе



«Шоколадная киста» яичника



BPD